


NEW Safety Count System

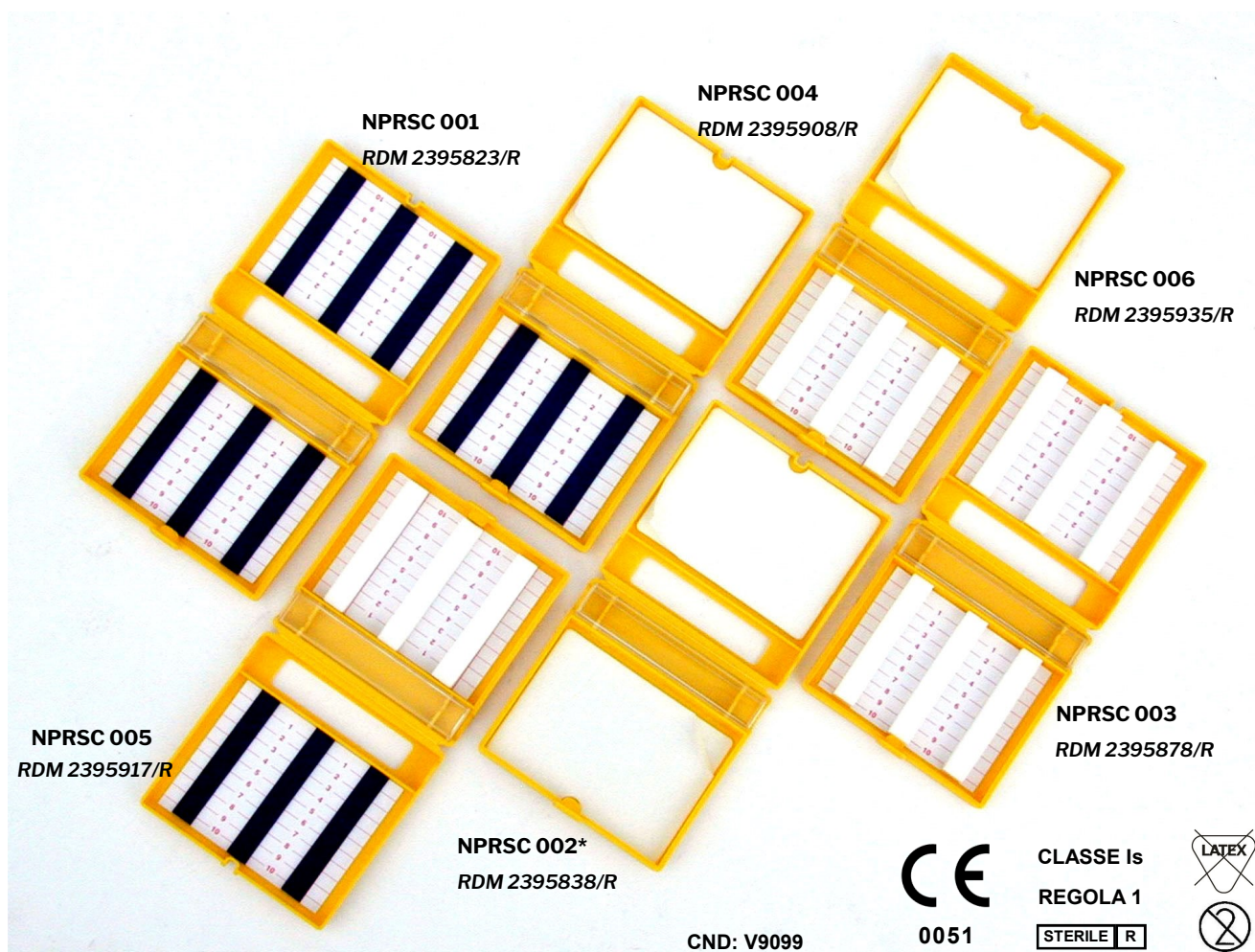

Scopo

Disarmatore di lame da bisturi e contenitore sterile monouso destinato a facilitare la raccolta, la conta e lo smaltimento di aghi e lame utilizzate nell'ambito di un intervento chirurgico, nel rispetto delle disposizioni ministeriali emanate con D. Lgs. del 28 settembre 1990 art. 2 (pubblicate sulla G.U. del 8.10.1990, Serie generale n.235) e del D.Lgs. del 19 febbraio 2014, n.19 - attuazione della Direttiva 2010/32/UE. È conforme ai requisiti indicati nel Decreto n.219 del 26 giugno 2000, nel D.P.R 254 del 15.07.2003 e alla Raccomandazione n.2, luglio 2006 del Ministero della Salute "Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale chirurgico all'interno del sito chirurgico". Marcato CE 0051 ai sensi del Regolamento (UE) 745/2017 sui dispositivi medici.

Caratteristiche

Il New Safety Count System consente "la conta" di lame da bisturi e aghi utilizzati in sala operatoria. Risolve inoltre i problemi di sicurezza ed evita i rischi di contaminazione insiti nello smaltimento di rifiuti taglienti ed appuntiti di ogni genere.

- E' sicuro, semplice, facile da usare ed economico.
- **Dotato di comparto dedicato, con copertura trasparente protettiva, per lo sgancio delle lame da bisturi pluriuso.**
- Disponibile in 6 modelli per la massima scelta dell'utilizzatore.
- Confezione singola sterile in carta di grado medico più polipropilene (sterilizzata a raggi gamma).
- Pratico dispenser contenente 18 blister. Box da 6 dispenser = 108 blister.
- Dimensioni da aperto: 18,5 cm x 9,5 cm x 2 cm.

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta







Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

1

Revisione del 26.02.2025

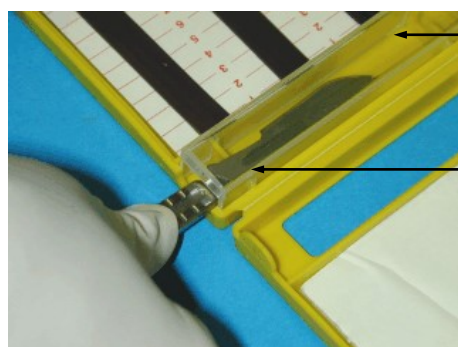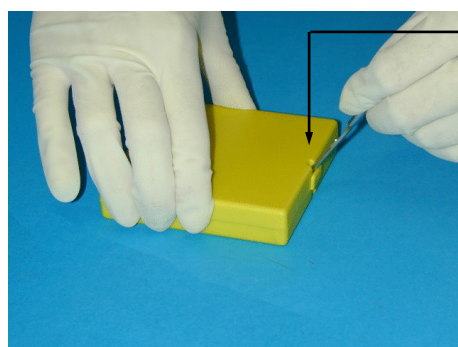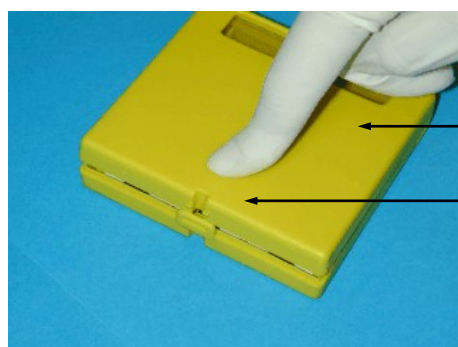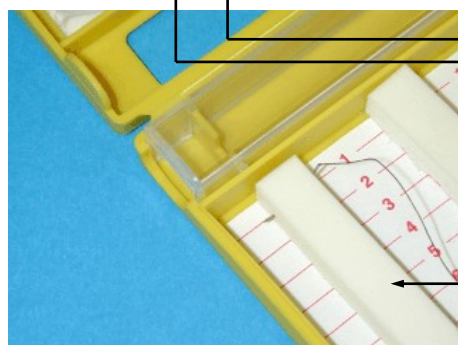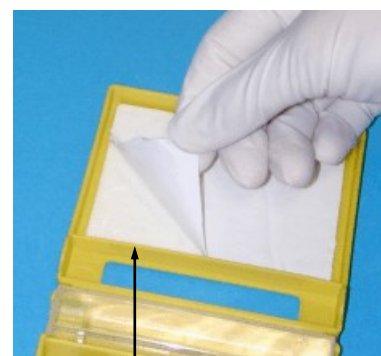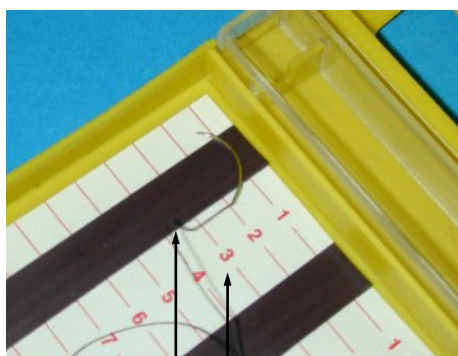

- Fondo adesivo a base acquosa in espanso che trattiene i materiali contaminati.
- Fondo numerato per un conteggio preciso.
- Strisce magnetiche oppure in espanso foam con adesivo a base acquosa per trattenere gli aghi di sutura usati.
- Robusto contenitore in compound di polipropilene giallo anti-foramento.
- Sicura chiusura a scatto resistentissima contro l'apertura accidentale ma eventualmente riapribile utilizzando un manico da bisturi.
- Il doppio dispositivo di sgancio collocato su entrambi i lati del dispositivo ne rende l'utilizzo semplice e sicuro sia per gli operatori destrimani che mancini.
- Copertura trasparente in polistirene.
- Una volta inserito il bisturi nel sistema di sgancio, si spinge in basso e si estrae il manico.
- Bordo interno prolungato per incrementare la sicurezza.
- Pratico dispenser da 18 blister.



Distribuito da:

Simitalia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it