



New Safety Count System Maxi


Serie MAXI per chirurgia speciale

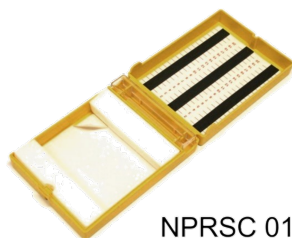


NPRSC 013
RDM 2398129/R

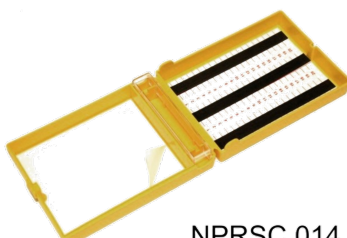


NPRSC 014
RDM 2398131/R

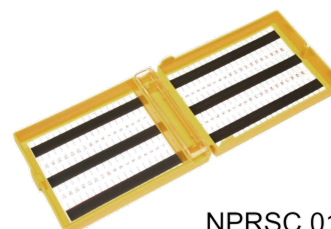


NPRSC 015*
RDM 2398132/R

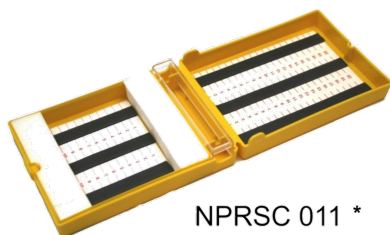


NPRSC 011*
RDM 2398127/R

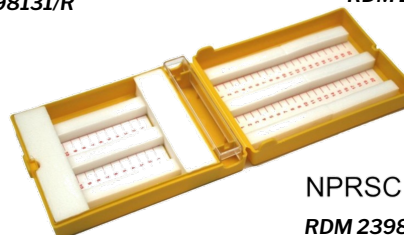


NPRSC 017*
RDM 2398134/R

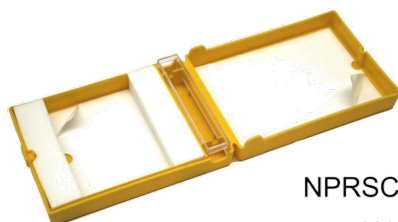


NPRSC 012*
RDM 2398128/R

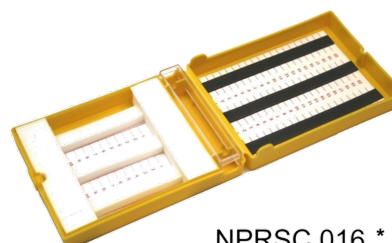


NPRSC 016*
RDM 2398133/R

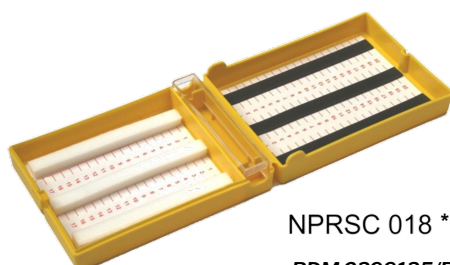

NPRSC 018*
RDM 2398135/R

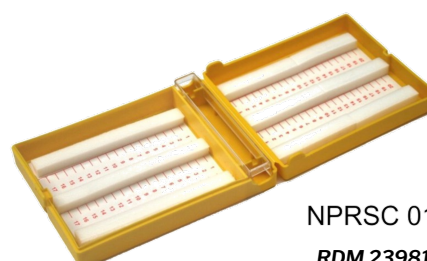

NPRSC 019*
RDM 2398136/R

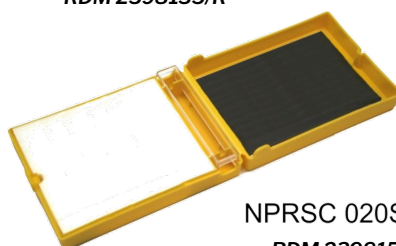

NPRSC 020S*
RDM 2398156/R

CND: V9099

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta.

Caratteristiche

Il New Safety Count System è un disarmatore di lame da bisturi e contenitore sterile monouso destinato a facilitare la raccolta, la conta e lo smaltimento di aghi e lame utilizzate nell'ambito di un intervento chirurgico.

E' sicuro, semplice e facile da usare.

- Disponibili numerosi modelli per la massima scelta dell'utilizzatore.
- Confezione singola sterile in carta di grado medicale più polipropilene (sterilizzata a raggi gamma).
- Box da 60 pz.
- Dimensioni da aperto: 26,5 cm x 9,5 cm x 2,5 cm. Dimensioni da chiuso: 13,2 cm x 9,5 cm x 3,5 cm.

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
 SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
 UNI CEI EN ISO 13485:2021
 Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
 Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
 www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it

Il doppio dispositivo di sgancio
collocato su entrambi i lati del
dispositivo, ne rende l'utilizzo semplice
e sicuro sia per gli operatori destrimani
che mancini

Fondo numerato per un
conteggio preciso

**Comparto dedicato, con copertura
trasparente protettiva, per lo sgancio delle
lame da bisturi pluriuso**

Fondo adesivo a base
acquosa in espanso che
trattiene i materiali
contaminati

Strisce magnetiche oppure in
espanso con adesivo a base
acquosa per trattenere gli aghi di
sutura usati

Una volta inserito il bisturi nel
sistema di sgancio, si spinge in
basso e si estrae il manico

Sicura chiusura a scatto
resistentissima contro l'apertura
accidentale ma eventualmente
riapribile utilizzando un manico da
bisturi

CE
0051

CLASSE Is
REGOLA 1
STERILE R



Bordo interno prolungato
per incrementare la
sicurezza

Robusto contenitore in compound di
polipropilene giallo anti-foramento

Distribuito da:

Sim italia s.r.l.
SURGICAL INTERNATIONAL MARKETING

Società certificata
UNI CEI EN ISO 13485:2021
Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Tel. +39 051.817902 +39 051.817850 Fax +39 051.817845
www.simitalia.it E-Mail: info@simitalia.it